



Mode d'emploi
Amfora
brancard de douche



Mode d'emploi

Amfora

6200 4015

hydraulique brancard de douche

Basic UDI-DI : 872025610341762004015KL



 **lopital®**
If caregivers have a choice

Remarque importante :

Lisez attentivement les instructions qui suivent avant d'utiliser l'Amfora !

Date de mise en service

Utilisateur

Nom

Adresse

Fabricant

Lopital Nederland B.V.

Laarakkerweg 9

5061 JR Oosterwijk

T +31 (0)13 5239300

www.lopital.nl

info@lopital.nl

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Explication des symboles dans le mode d'emploi et sur les étiquettes			
	Veuillez noter		Lisez le manuel d'utilisation avant de l'utiliser.
	Date de production		Lisez le protocole de nettoyage et de désinfection.
	Détails du fabricant		Antibactérien
	Numéro d'article		Température
	Numéro de série		Pression de l'air
	Conformité Européenne		Niveau d'humidité
	Dispositif médical		Charge maximale

Sommaire

1.	Introduction	5
1.1.	Avant-propos	5
1.2.	Sécurité	5
1.3.	Garantie	7
2.	Utilisation	7
2.1.	Mise en service	7
2.2.	Travailler avec Amfora	9
3.	Commande	10
3.1.	Blocage des roues	10
3.2.	Barrière latérale	10
3.3.	Réglage du dossier	10
3.4.	Monter / descendre	11
3.5.	Evacuation d'eau	11
4.	Nettoyage et entretien	12
5.	Conditions environnementales	13
6.	Enlèvement de composants	13
7.	Caractéristiques techniques	13
7.1.	Construction	13
7.2.	Dimensions	14

1. Introduction

1.1. Avant-propos

Le brancard de douche Amfora est un équipement ergonomique pour soigner et faire la toilette de clients. Le confort est optimal, tant pour le client que pour le soignant. L'utilisation du brancard de douche est polyvalente et s'associe aux autres accessoires, tels que les lits, les chaises roulantes et de douche, les lèvepersonnes et matériels de transfert, comme EasySlide. Il s'agit des fonctions essentielles du brancard de douche.



Le cadre de l'Amfora est doté d'un revêtement antibactérien. Le revêtement contient les ions d'argent. Le revêtement antibactérien à base d'ions d'argent empêche les dangereux micro-organismes tels que les bactéries, les champignons et les algues de se multiplier et de se répandre. Cette efficacité a été confirmée par plusieurs tests. Les germes ont été réduits de manière démontrable à 99,99 % en peu de temps. Le revêtement n'affecte que les bactéries qui se trouvent sur la surface et non sur les micro-organismes en suspension dans l'air. Le revêtement protège les utilisateurs ou d'autres personnes contre les bactéries, les germes, les virus ou les maladies d'autres organismes nuisibles. Sur une surface sale, le revêtement perd ses propriétés antibactériennes. Un nettoyage et une désinfection adéquats sont donc toujours nécessaires.

La durée de vie technique prévue pour Amfora est de 10 ans, à condition que l'entretien quotidien et périodique soit effectué conformément au programme d'entretien spécifié (*Cf. chapitre 5. Nettoyage et entretien*).

L'Amfora est un produit médical de Classe I avec marquage CE. Ce marquage est conforme au règlement MDR (UE) 2017/745.

1.2. Sécurité



Le non respect des points de sécurité ci-dessous et des autres descriptions dans ce mode d'emploi peut entraîner des situations dangereuses. Par conséquent, parcourez-le avant utilisation.

Utilisation

- Il est interdit de charger le brancard de douche avec un poids de plus de 150 kg.
- Utilisez uniquement des pièces d'origine fournies par Lopital.
- Utilisez le brancard de douche dans un environnement de travail propre et ordonné.
- Seul le personnel dont qualification est vérifiable peut travailler avec le brancard de douche.
- Les piscines ne font pas partie de ce qu'il est convenu d'appeler un 'environnement normal' et certains composants du dispositif pourront voir leur durée de vie utile raccourcie.

- Le brancard de douche ne peut être utilisé sur un support avec une inclinaison latérale de plus de 5 degrés.
- Le brancard de douche ne peut être utilisé sur un support avec une inclinaison en avant / arrière de plus de 10 degrés.
- Le brancard de douche ne doit pas être utilisé / nettoyé à une température d'eau supérieure à 43°C.
- Vérifiez toujours que le frein soit actionné avant de procéder au transfert du client.
- Avant de déplacer le brancard de douche, donnez des instructions au client.
- Le brancard de douche ne peut être utilisé qu'à l'intérieur.
- Ne déplacez et ne manœuvrez le brancard de douche qu'en position basse.
- Pendant le déplacement du brancard de douche, ne montez ou ne descendez pas le brancard de douche / la table d'habillage.
- Il n'est pas permis d'utiliser le brancard de douche pour déplacer autre chose qu'une personne.
- Faites attention aux obstacles en montant et en descendant.

Entretien

- Le brancard de douche doit passer une inspection et un entretien périodiques au moins 1 fois par an.
- Si la surface de couchage est endommagée, la remplacez pour des raisons d'hygiène.
- Seul le personnel qualifié de Lopital est habilité à effectuer le service après-vente et l'entretien du brancard de douche.
- Seul le personnel qualifié de Lopital est habilité à effectuer le remplacement des pièces structurelles du brancard de douche / de la table d'habillage.
- En cas de déformation du brancard de douche suite à une utilisation inappropriée, à un transport, un accident ou une mauvaise maintenance, cessez toute utilisation et contactez le fournisseur.

En cas de dysfonctionnement, veuillez contacter Lopital ou votre fournisseur local.

Courriel : info@lopital.nl



L'Amfora brancard de douche ne doit être utilisé que par du personnel qualifié ayant l'expérience du travail avec le groupe cible d'utilisateurs et ayant regardé les vidéos d'instruction/formation sur le site web de Lopital.



L'Amfora brancard de douche a été développé et produit pour être utilisé dans un environnement de soins professionnels.



Les modifications apportées à la construction peuvent affecter la sécurité du Amfora. En outre, les conditions de responsabilité et de garantie de Lopital s'éteignent. Par conséquent, l'Amfora n'est plus conforme au règlement MDR (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.



Si un incident grave lié à ce dispositif médical affecte le soignant ou le client, il doit être signalé à Lopital ou au distributeur du dispositif médical.

1.3. Garantie

Les produits Lopital sont garantis pendant 5 ans contre les défauts de construction et/ou de matériaux. En cas de conditions différentes, la période de garantie exacte est indiquée sur votre facture, qui fait également office de certificat de garantie. Aucune garantie n'est accordée sur les pièces soumises à l'usure, sauf s'il s'agit de défauts de construction et/ou de matériaux.

2. Utilisation

2.1. Mise en service

Avant de mettre le brancard de douche en service, contrôlez si les composants ci-dessous sont présents. Ces composants, s'ils présentent un défaut, peuvent être remplacés par du personnel compétent.



2.2. Travailler avec Amfora

Etape 1

En cas de transfert de personnes, veillez à toujours actionner le frein du brancard de douche (Cf. *paragraphe 3.1. Blocage des roues*).

Etape 2

Placez le brancard de douche contre le lit, dans la même orientation tête / pied que le client.

Etape 3

Abaissez la barrière latérale du brancard de douche (Cf. *paragraphe 3.2. Barrière latérale*).

Etape 4

Remontez le plateau du brancard de douche un peu au-dessus du matelas du lit et rabattez la barrière latérale vers le bas.

Etape 5

Ajustez par glissement le brancard de douche entre tête et pied de manière à surplomber le lit le plus possible.

Etape 6

Bloquez les roues du brancard de douche (Cf. *paragraphe 3.1. Blocage des roues*).

Etape 7

Placez-vous à l'autre extrémité du lit et disposez l'EasySlide entre le client et le brancard de douche.

Etape 8

Faites glisser le client du lit au brancard de douche en vous aidant de l'EasySlide.

Etape 9

Remontez le plateau du brancard de douche de quelques centimètres et refermez la barrière latérale.

Etape 10

Déverrouillez les freins des roues du brancard de douche et retirez l'EasySlide (Cf. *paragraphe 3.1. Blocage des roues*).

3. Commande

3.1. Blocage des roues

- Le frein peut être actionné sur le brancard de douche en appuyant avec le pied sur la languette bleue (1) sur la roue (Cf. figure 1).
- Le frein peut être déverrouillé sur le brancard de douche en relevant la même languette, en appuyant avec le pied sur le dessus de la languette (2) (Cf. figure 1).

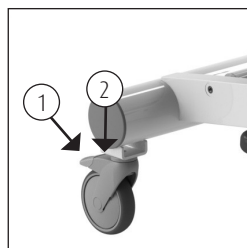


Figure 1. Blocage des roues.

3.2. Barrière latérale

- Le brancard de douche est doté de barrières latérales.
- La barrière latérale est équipée d'une sécurité qui empêche le client de soulever seule la barrière latérale.
- La sécurité doit être déverrouillée avant de pouvoir rabattre la barrière latérale en position basse.
- Déverrouillez la protection en retirant les boulons situés de part et d'autre de la barrière latérale (1).
- Tournez la barrière latérale déverrouillée vers l'extérieur (3).
- Tournez la barrière latérale à nouveau vers le haut pour la rabattre. Sur les brancards de douche, la barrière latérale peut être verrouillée en fixant les boulons aux endroits prévus à cet effet.

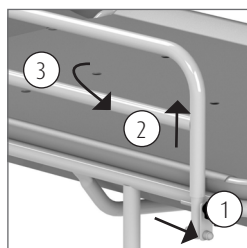


Figure 2. Barrière latérale.

3.3. Réglage du dossier

L'Amfora est équipée d'un dossier réglable. Pour régler le dossier, desserrez les deux molettes de réglage situées sous la partie dossier, de chaque côté. Placez le dossier dans la position souhaitée, puis resserrez fermement les deux molettes afin de verrouiller le dossier en toute sécurité. Vérifiez toujours que le dossier est correctement verrouillé avant d'utiliser le brancard de douche.

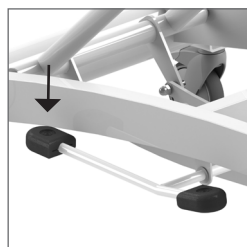


Figure 3. Monter.



Assurez-vous toujours que les deux molettes de réglage sont complètement serrées avant de prodiguer des soins à un patient sur le brancard de douche. Un dossier qui n'est pas correctement verrouillé peut créer une situation dangereuse.

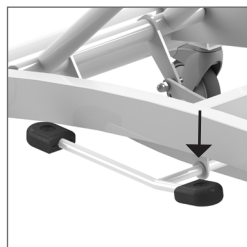


Figure 4. Descendre.

3.4. Monter / descendre

Monter

- Lorsque le client se trouve sur le brancard de douche, verrouillez le frein des roues avant de remonter le brancard de douche.
- Pour remonter le brancard, actionnez du pied le bras le plus long du pédalier, de manière douce et régulière (Cf. figure 3).
- Pendant le mouvement progressif, le soignant met son buste dans le sens de la longueur du brancard de douche, de manière à ne pas pouvoir tourner le buste par rapport aux pieds.
- Pendant que le brancard de douche remonte, soyez attentif à la sécurité du client.

Descendre

- Pour abaisser le brancard, enfoncez du pied le petit bras du pédalier (Cf. figure 4).
- Le brancard de douche descend sous l'effet de la pesanteur. La vitesse de rotation peut être réglée en maintenant la pédale légèrement enfoncée.
- Pendant que le brancard de douche descend, soyez attentif à la sécurité du client.



Avant de régler la hauteur du brancard de douche, vérifiez d'abord qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve sous celui-ci.

3.5. Evacuation d'eau

- L'eau du brancard de douche est évacuée par le tuyau prévu à cet effet.
- Débranchez le tuyau de son support et raccordez-le au point d'évacuation le plus bas possible.
- Pendant le transport, suspendez toujours le tuyau à son support pour empêcher que de l'eau ne coule sur le sol.

4. Nettoyage et entretien

L'Amfora doit être nettoyé à l'eau avec un produit d'entretien ménager courant après chaque utilisation. N'utilisez pas d'accessoires abrasifs ou de produits solvants agressifs à cet effet. Si nécessaire, le plateau peut être désinfecté avec une solution d'éthanol ou de propanol à 70%.


Vérifiez régulièrement si les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières et nettoyez-les le cas échéant. L'entretien et la réparation du brancard de douche ne doivent être effectués que par du personnel qualifié.

Plan d'entretien	
Entretien après chaque utilisation	Nettoyer le brancard de douche à l'eau avec des produits d'entretien ménager normaux.
Quotidien	Nettoyer et désinfecter le revêtement.
Hebdomadaire	- Nettoyer le cadre. - Vérifier si les roues sont exemptes de cheveux, de traces de savon ou de poussières et les nettoyer le cas échéant. - Contrôler le bon fonctionnement du brancard de douche.
Annuel	Selon le règlement MDR (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, un brancard de douche doit être entretenue conformément aux lignes directrices du fabricant. Ce processus sera de préférence effectué par Lopital ou un autre organisme agréé. Lopital offre la possibilité de faire inspecter et entretenir le brancard de douche une fois par an dans le cadre de l'entretien préventif périodique. Pour plus d'informations sur le contrat de maintenance, veuillez contacter Lopital (info@lopital.nl) ou votre fournisseur.


Pour des instructions complètes de nettoyage et de désinfection, voir le protocole de nettoyage et de désinfection sur le site web de Lopital (www.lopital.fr/telechargements/).

5. Conditions ambiantes

Conditions ambiantes pendant le stockage et le transport

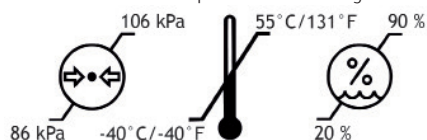

Conditions ambiantes pendant le fonctionnement

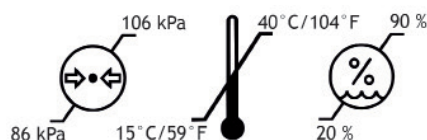

6. Enlèvement de composants

Tous les composants qui sont remplacés ou enlevés peuvent être retournés à Lopital BV . Il est également possible de proposer ces composants au monteur, lequel se chargera de leur élimination. Nous veillerons à ce que tous les composants soient retraités de manière respectueuse de l'environnement.

7. Caractéristiques techniques

Le brancard de douche est étanche aux projections d'eau, de sorte qu'il peut être utilisé sous la douche. Cela est signalé par l'indication IPX4.

7.1. Construction

Cadre inférieur :	Aluminium + 2 couches de revêtement par poudre
Cadre supérieur :	Acier + 2 couches de revêtement par poudre
Barrières latérales :	Acier + 2 couches de revêtement par poudre
Roues :	Ø 12,5 cm, à double blocage
Fixations :	Inox + acier galvanisé
Poids net :	63 kg
Charge maximale :	150 kg

7.2. Dimensions



Dimensions extérieures

(longueur x largeur x hauteur) : 190 x 74 x 50 à 100 cm

Tuyau d'évacuation d'eau : Intérieur Ø 4 cm

Empattement : 120 cm

Ecartement des roues : 65 cm

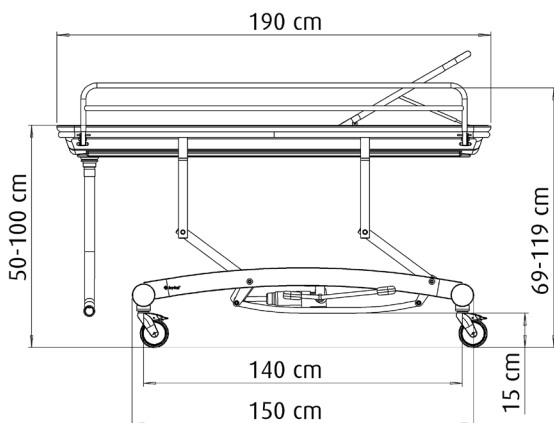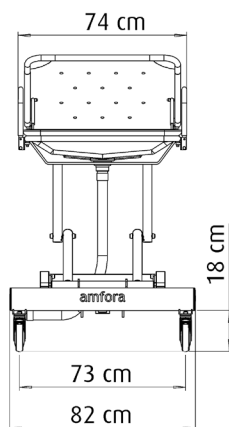



Pour plus d'informations, visitez notre site Web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V. Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56,
5060 AB Oisterwijk, Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl,
www.lopital.nl

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.



Green Deal

MADE IN
THE NETHERLANDS

ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001



Scan for
information