



Creating balance in healthcare



# Marina deluxe & Marina basic Brancard de douche





Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave

**Hydraulique : 6100 2010 / Electrique : 6100 2060**

# Marina deluxe Brancard de douche

## À l'exclusion des matelas

La civière de douche Marina deluxe est une aide pour le soin et le lavage des clients de manière ergonomique. Pour le client et l'aidant, le confort est optimal.

Le Marina deluxe se compose d'un châssis mobile et d'une surface d'appui réglable en hauteur avec un matelas souple. Le cadre de la Marina deluxe a un revêtement antibactérien dû à l'ajout d'ions d'argent. En outre, la Marina deluxe est mobile.

Le brancard est équipé d'un support anti-trendelenburg. La Marina deluxe dispose, outre la tribune anti-trendelenburg, réglage du dos électrique ou par ressort à gaz.

La Marina deluxe est multifonctionnelle et est compatible avec l'utilisation d'autres aides telles que des treuils, des chouettes coulissantes, des chaises et des lits à roulettes et de douche.

- La charge maximale est de 227 kg.
- Facile à manœuvrer grâce à la construction légère en aluminium.

- Grand empattement stable.
- Roues de grand diamètre (Ø150 mm / 5,9 pouces).
- Système de freinage semi-central.
- Disponible en version hydraulique et électrique.
- S'il s'agit de la version hydraulique: commande de pompe ergonomique pour le réglage de la hauteur.
- S'il s'agit de la version électrique : fonction d'abaissement d'urgence, arrêt d'urgence, chargeur mural facile d'utilisation et batterie interchangeable.
- Réglage du dos en continu jusqu'à 25 degrés.
- Réglage de l'inclinaison pour un meilleur drainage de l'eau.
- Rails latéraux sûrs et faciles à ouvrir et à fermer, réglables en 3 positions : fermé / large / ouvert.
- Résistant à la corrosion grâce au cadre en aluminium enduit.
- Le matelas est confortable, antibactérien, ignifuge et exempt de plastifiants nocifs.
- Revêtement antibactérien sur le cadre.
- Finition élégante pour un nettoyage et une désinfection optimaux.
- Réglage vertical, haut / bas.
- Permet de bien passer en-dessous (19 cm).

Le Marina deluxe est équipé d'un réglage de longueur intégré standard. Cela permet d'allonger ou de raccourcir facilement la civière de la douche. Chaque longueur a son propre matelas :

Article n°	Description	Longueur intérieur	Largeur intérieure
6720 0010	Matelas 186 cm	170	70
6720 0020	Matelas 206 cm	190	70
6720 0030	Matelas 226 cm	210	70

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.





Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave


Hydraulique : 6100 2010 / Electrique : 6100 2060

# Marina deluxe Brancard de douche

À l'exclusion des matelas



Système de freinage semi-central.

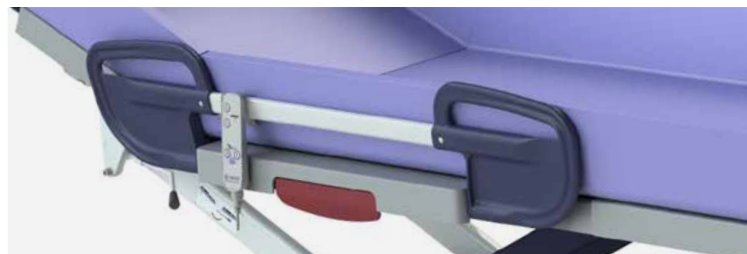

Barrière latérale avec partie centrale abaissée pour un soin optimal.



Ajustement de la longueur.



Vidange de l'eau.



Réglage du dos électrique ou par ressort à gaz (Marina deluxe).



Boîtier de commande d'arrêt d'urgence (Marina électrique deluxe).



Fonctionnement manuel avec indication de la batterie (Electric Marina deluxe).



Réglage des diapositives (Anti-Trendelenburg)..



Contrôle haut/bas (Marina hydraulique deluxe).





Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave

Hydraulique : 6100 2010 / Electrique : 6100 2060

# Marina deluxe Brancard de douche

À l'exclusion des matelas

- Conduite haute / basse
  - Réglage du dos
  - Commande manuelle
  - Controlbox
  - Accubox
  - Chargeur
- Hydraulique ou électrique  
 Électrique ou par ressort à gaz  
 Commande manuelle à quatre boutons avec crochet de suspension, IPX6  
 24VDC, max. 250 W, IPX6  
 24V, 2,9 Ah, IPX6  
 100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A,  
 Chargeur mural

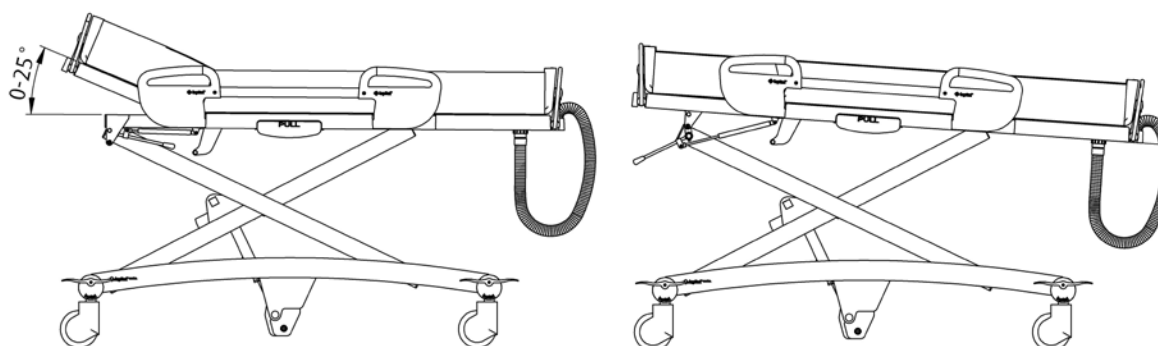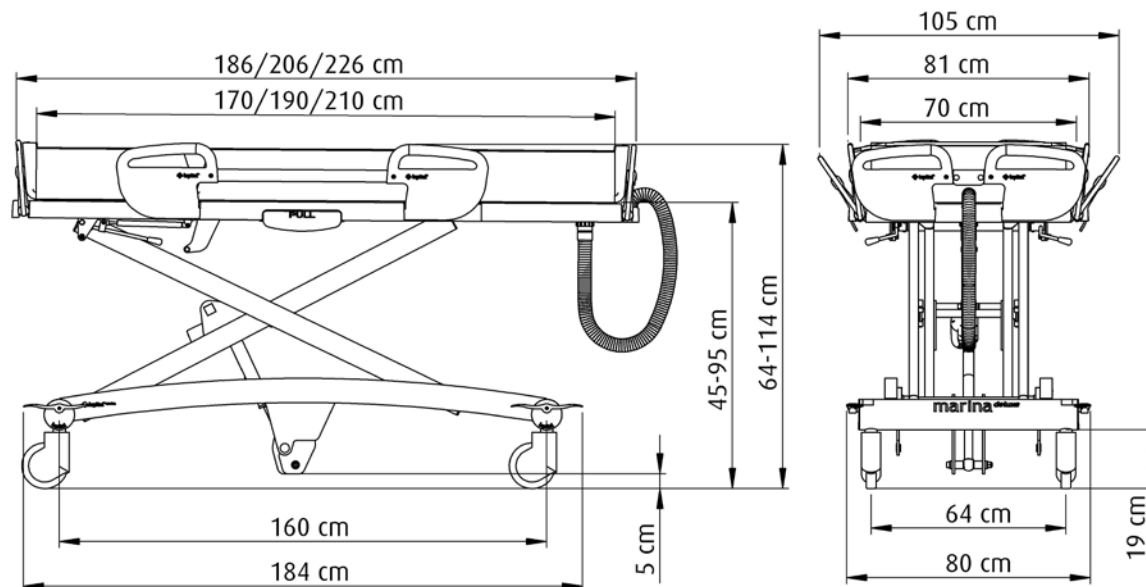

N° d'article	Art. description	Longueur extérieur	Largeur extérieur	Longueur intérieur	Largeur intérieur	Haut / bas	Charge max. en kg	Poids produit en kg
6100 2010	Marina deluxe Brancard de douche hydraulique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	80
6100 2060	Marina deluxe Brancard de douche électrique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	80
6720 0010	Matelas 186	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matelas 206	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matelas 226	-	-	210	70	-	-	-

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave

**Hydraulique : 6100 2000 / Electrique : 6100 2050**

# Marina basic Brancard de douche

**À l'exclusion des matelas**



La civière de douche de base Marina est une aide pour les soins ergonomiques et le lavage des clients. Pour le client et l'aidant, le confort est optimal.

Le Marina basic se compose d'un cadre de base mobile et d'une surface d'appui réglable en hauteur avec un matelas souple. Le cadre du Marina basic est doté d'un revêtement antibactérien dû à l'ajout d'ions d'argent. De plus, le Marina basic est mobile. Le brancard est équipé d'un support anti-trendelenburg.

Le Marina basic est multifonctionnel et est compatible avec l'utilisation d'autres aides telles que des treuils, des chouettes coulissantes, des chaises et des lits à roulettes et de douche.

- La charge maximale est de 227 kg.
- Facile à manœuvrer grâce à la construction légère en aluminium.
- Grand empattement stable.

- Roues de grand diamètre (Ø150 mm / 5,9 pouces).
- Disponible en version hydraulique et électrique.
- S'il s'agit de la version hydraulique: commande de pompe ergonomique pour le réglage de la hauteur.
- S'il s'agit de la version électrique : fonction d'abaissement d'urgence, arrêt d'urgence, chargeur mural facile d'utilisation et batterie interchangeable.
- Réglage de l'inclinaison pour un meilleur drainage de l'eau.
- Rails latéraux sûrs et faciles à ouvrir et à fermer, réglables en 3 positions : fermé / large / ouvert.
- Résistant à la corrosion grâce au cadre en aluminium enduit.
- Le matelas est confortable, antibactérien, ignifuge et exempt de plastifiants nocifs.
- Revêtement antibactérien sur le cadre.
- Finition élégante pour un nettoyage et une désinfection optimaux.
- Réglage vertical, haut / bas.
- Permet de bien passer en-dessous (19 cm).

Le Marina basic est équipé d'un réglage de longueur intégré standard. Cela permet d'allonger ou de raccourcir facilement la civière de la douche. Chaque longueur a son propre matelas :

Art.nr.	Description	Binnen lengte	Binnen breedte
6720 0010	Matelas 186 cm	170	70
6720 0020	Matelas 206 cm	190	70
6720 0030	Matelas 226 cm	210	70

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.





Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave

Hydraulique : 6100 2000 / Electrique : 6100 2050

# Marina basic Brancard de douche

À l'exclusion des matelas



Roues pivotante à frein




Latérale avec partie centrale abaissée pour un soin optimal. Ajustement de la.



Ajustement de la longueur.



Vidange de l'eau.

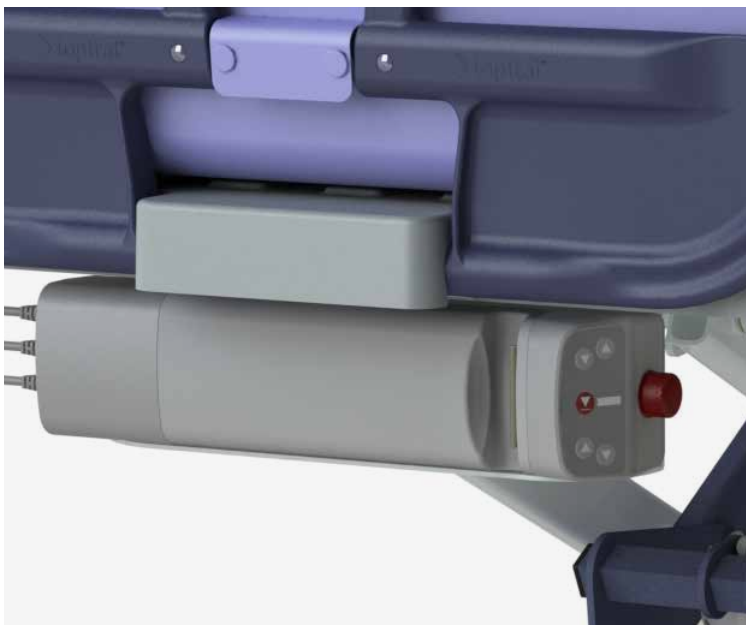

Boîtier de commande d'arrêt d'urgence (Marina électrique basic).



Réglage des diaphragmes (Anti-Trendelenburg).



Fonctionnement manuel avec indication de la batterie (Electric Marina basic).



Contrôle haut/bas (Marina hydraulique basic).




Convient pour des personnes présentant un handicap grave à très grave

Hydraulique : 6100 2000 / Electrique : 6100 2050


# Marina basic Brancard de douche

À l'exclusion des matelas

- Conduite haute / basse
  - Commande manuelle
  - Controlbox
  - Accubox
  - Chargeur
- Hydraulique ou électrique  
 Commande manuelle à quatre boutons avec crochet de suspension, IPX6  
 24VDC, max. 250 W, IPX6  
 24V, 2,9 Ah, IPX6  
 100-240V AC, 50-60 Hz, max. 1A,  
 Chargeur mural

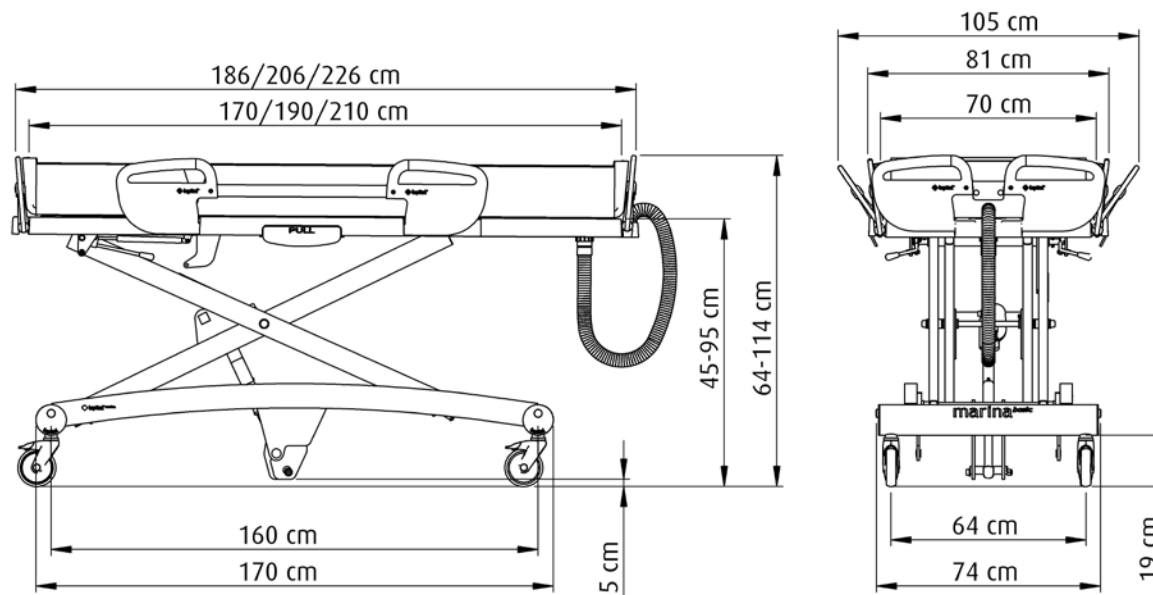

N° d'article	Art. description	Longueur extérieur	Largeur extérieur	Longueur intérieur	Largeur intérieur	Haut / bas	Charge max. en kg	Poids produit en kg
6100 2000	Marina deluxe Brancard de douche hydraulique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6100 2050	Marina deluxe Brancard de douche électrique	186 206 226	81	170 190 210	70-80	45-95	227	76
6720 0010	Matelas 186	-	-	170	70	-	-	-
6720 0020	Matelas 206	-	-	190	70	-	-	-
6720 0030	Matelas 226	-	-	210	70	-	-	-

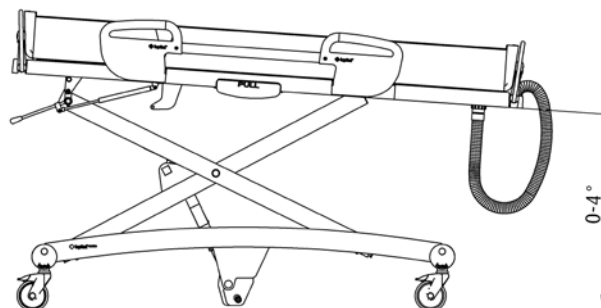

Toutes les mesures dans cette matrice sont en centimètres.



Creating balance in healthcare



**Pour plus d'informations, visitez notre site Web : [www.lopital.fr](http://www.lopital.fr)**

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk,  
Tel +31 (0)13 5239300, E-mail [info@lopital.nl](mailto:info@lopital.nl), [www.lopital.nl](http://www.lopital.nl)

**Pour plus d'informations, visitez notre site Web : [www.lopital.be](http://www.lopital.be)**

Lopital België Bvba, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar  
Tel +32 (0)3/870.51.60, E-mail [info@lopital.be](mailto:info@lopital.be), [www.lopital.be](http://www.lopital.be)

Tous les appareils produits par Lopital sont conformes aux normes applicables suivantes : MDR (EU) 2017/745, NEN-EN-ISO 14971, ISO 17966, ISO 9001:2015, ISO 13485:2016/C12:2018, NEN-EN 12182, ISO 60601, EN ISO 60601-1-2, EN ISO 60601-1-6, EN ISO 62366, CAN/CSA 60601, ANSI/AAMI ES 60601-1

