

Reflex XL

Des soins puissants et précis

5100 5950

Reflex XL chaise de douche-toilette

Le Reflex XL s'appuie sur le concept Reflex éprouvé de Lopital et offre davantage d'espace, de confort et de possibilités de réglage pour un large éventail d'utilisateurs. Ses fonctions électriques de réglage de la hauteur et de l'inclinaison permettent des mouvements fluides et maîtrisés, améliorant l'ergonomie de travail tout en maintenant l'utilisateur dans une position sûre et confortable. La conception réfléchie de la chaise facilite les soins d'hygiène et l'utilisation des toilettes, en associant fonctionnalité médicale et simplicité d'utilisation au quotidien.

Fabriqué à partir de matériaux de haute qualité et assemblé avec précision, le Reflex XL offre une base stable et facile à nettoyer, parfaitement adaptée aux environnements de soins professionnels. Il est conçu pour répondre aux exigences d'une utilisation quotidienne grâce à un confort durable, une utilisation intuitive et à l'attention particulière portée par Lopital à la sécurité des aidants et à la dignité des utilisateurs.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de quatre roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.

Fonction d'assistance à la mise en position debout. Grâce à l'inclinaison négative de l'assise, le Reflex XL offre une fonction d'assistance efficace à la mise en position debout. Cela améliore l'autonomie de l'utilisateur tout en réduisant les contraintes physiques pour le soignant.



Spécifications techniques

Charge max.	227 kg
Poids du produit	63 kg
Largeur du siège	57 – 67 cm
Profondeur du siège	49 cm
Hauter du siège (réglable)	47 – 85 cm


🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr



Convient aux personnes
à mobilité modérément
réduite à fortement réduite

5100 5950

Reflex XL chaise de douche-toilette

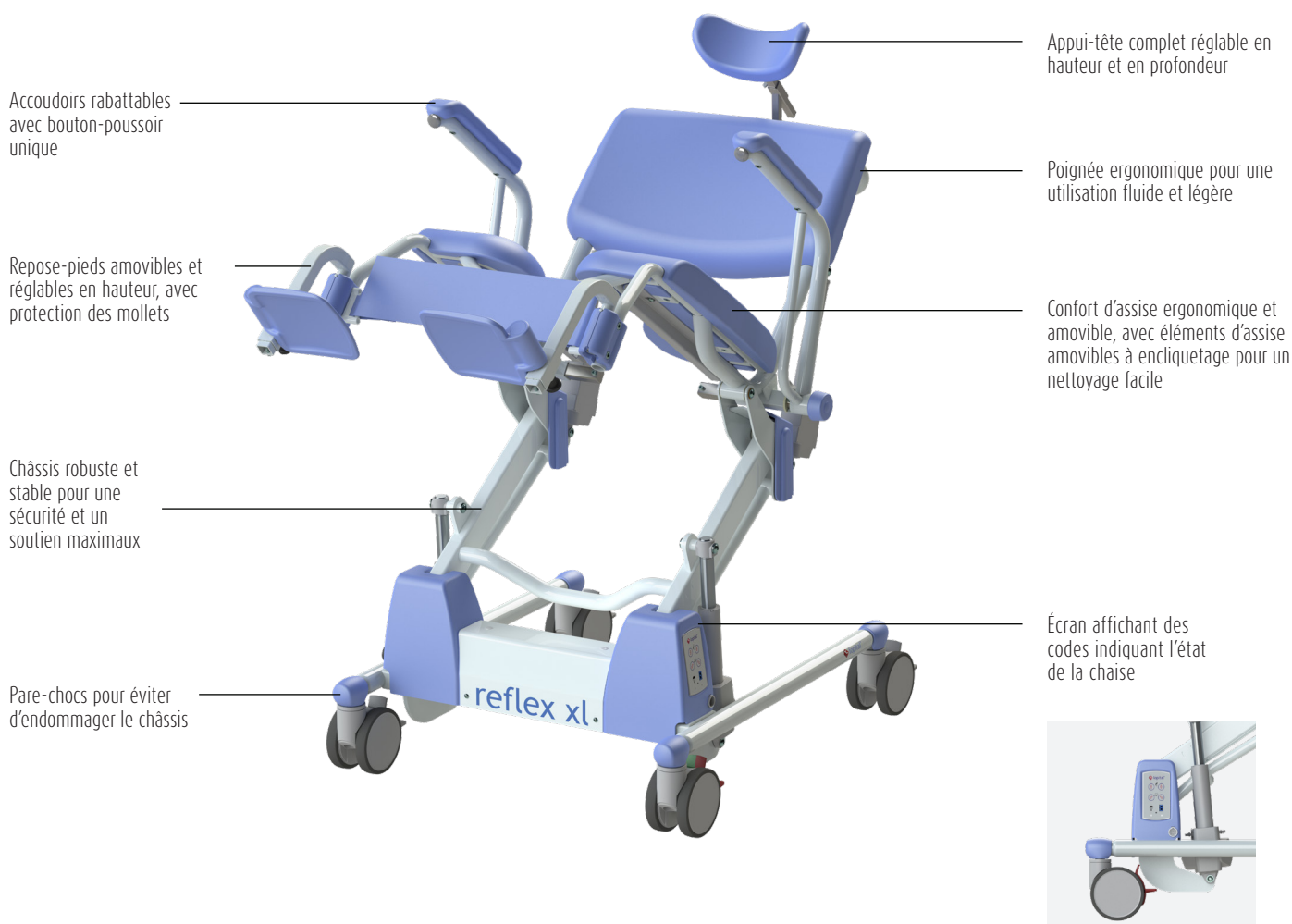

En option

6960 8026
Jeu de supports de
jambes confortables



Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base	117 cm
Largeur totale du châssis de base	74 cm
Rayon de braquage	132 cm
Réglage de l'inclinaison	0 à 30 degrés vers l'arrière, 10 degrés vers l'avant
Alimentation électrique	24V
Capacité de la batterie	7Ah
Chargeur (Mascot 3743)	110-240V AC, 50-60Hz, max. 0.35A, longueur du câble 1.5 m
Profondeur/hauteur de l'appui-tête complet	profondeur 7 cm; hauteur 12 cm
Réglage en hauteur du repose-pieds	8 cm

Options

- 6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique
- 6960 8026 Jeu de supports de jambes confortables, amovibles et réglables
- 7057 0508 Roue 125 Fixation de la direction



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information