



Creating balance in healthcare



Elexo Chaise de douche- toilette



5100 5500

Elexo Chaise de douche-toilette



5100 5500

Elexo Chaise de douche-toilette avec repose-pieds amovibles

Soigner des clients sur des chaises de douche-toilette traditionnelles est une tâche difficile. Le personnel soignant est forcé d'adopter une posture contre nature et doit subir une charge statique sur le dos. Avec la chaise de douche-toilette réglable en hauteur Elexo, l'hôpital leur offre un soulagement.

L'Elexo offre confort et sécurité, tant au personnel qu'au client / à la personne. Grâce à sa hauteur flexible, la charge exercée sur le dos du soignant est limitée au minimum, par quoi l'Elexo est parfaitement conforme à la politique sur les conditions de travail dans le domaine de la santé.

Grâce à la possibilité de réglage électrique en hauteur, la chaise atteint une inclinaison maximale de 20 degrés, de manière à offrir un équilibre optimal en position assise au client.

- Charge maximale 180 kg.
- Réglage d'inclinaison du dossier de 0 à 20 degrés.
- Réglage électrique haut / bas aisé.
- Commande manuelle avec témoin de batterie.
- Mode veille après 60 minutes.
- Assise percée rembourrée avec ouverture et insert.
- Accoudoirs rembourrés rabattables avec fermeture frontale pour un transfert latéral.
- Assise et dossier ergonomiques.
- Repose-pieds rabattables avec protège-mollets.
- Repose-pieds escamotables et amovibles.
- Guide pour seau ou bassin de toilette.
- 4 roues freinées pivotantes en plastique.
- Grande stabilité grâce à l'utilisation de 2 moteurs de levage.

Options

- Art.no. 6830 5650 Accoudoirs droits.
- Art.no. 6840 5661 Accoudoirs à double verrouillage.
- Art.no. 6840 5500 Appuie-tête / nuque réglable.
- Art.no. 6950 1104 Bassin en plastique avec couvercle.
- Art.no. 6950 1120 Ceinture de sécurité.
- Art.no. 6950 5624 Dossier en platilon.
- Art.no. 6950 5625 Siège en platilon.
- Art.no. 6960 8026 Repose-jambes confort réglables.
- Art.no. 6975 8045 Ceinture avec quatre points de sécurité.
- Art.no. 7556 0025 Roue directionnelle gauche avant.





Convient pour des personnes présentant un handicap léger à grave



Assise ergonomique avec insert.



Option: Art.no. 6960 8026 Repose-jambes confort réglables.



Option: Art.no. 6950 1104 Bassin en plastique.



Accoudoirs rembourrés rabattables individuellement avec fermeture frontale.



Commande manuelle avec témoin de batterie.



Point de chargement avec accouplement magnétique.




La position la plus basse est 50 cm.



Réglage d'inclinaison à 20 degrés.

Spécifications techniques

- Charge max. 180 kg
- Poids produit 47 kg
- Largeur d'assise 47 cm
- Profondeur d'assise 44 cm
- Hauteur d'assise (réglable) 50 à 105 cm
- Réglage d'inclinaison du dossier 0 à 20 degrés
- Longueur totale du châssis 104 cm
- Largeur totale du châssis 70 cm
- Rayon de braquage 118 cm
- Entraînement électrique 24V
- Capacité de l'accu 7Ah
- Chargeur 220V 50/60Hz 500mA
- Résistance à l'eau IPX4

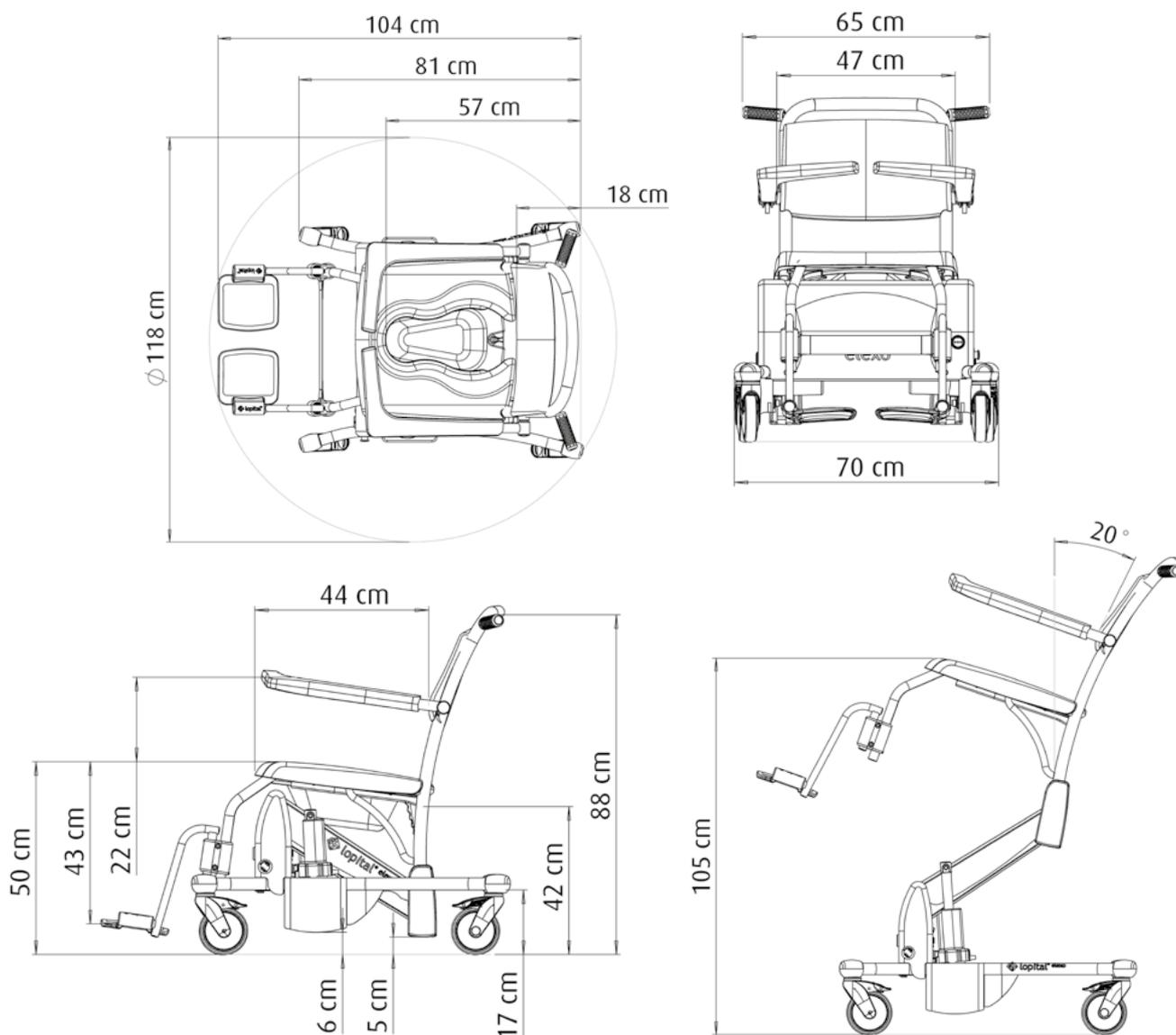

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.fr

Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk, Postbus 56, 5060 AB Oisterwijk
 Tél +31 (0)13 5239300, Fax +31 (0)13 5239301, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Pour plus d'informations, visitez notre site web : www.lopital.be

Lopital Belgique SPRL, Antwerpsesteenweg 124, 2630 Aartselaar
 Tél +32 (0)3/870.51.60, Fax +32 (0)3/877.79.44, E-mail info@lopital.be, www.lopital.be

