

Lotus

Favoriser des transferts sûrs, avec confort et maîtrise

5900 8200 / 8250 / 8270

Lotus verticalisateur actif

Le Lotus est une aide active à la verticalisation conçue pour les personnes qui peuvent encore se tenir debout de manière autonome et disposent d'une stabilité du tronc suffisante, mais qui peuvent éprouver des difficultés à marcher ou être dans l'incapacité de marcher. Une fois que la personne s'est assise sur le Lotus, les aidants peuvent la déplacer en toute sécurité et avec efficacité.

Le Lotus est destiné aux transferts de courte distance, par exemple pour passer du lit aux toilettes. Comme la personne adopte une position assise active, moins d'effort est nécessaire pour la remettre en position debout. Le Lotus offre un confort optimal, tant pour la personne que pour l'aidant.

Le Lotus est équipé de composants d'assise pivotants avec verrouillage par encliquetage, d'un appui confortable pour le bas des jambes et d'une fonction d'écartement des jambes. Cette fonction permet d'approcher le Lotus au plus près de la personne, afin qu'elle puisse s'asseoir activement. Le Lotus encourage la personne à participer activement aux transferts, ce qui contribue à solliciter les muscles et à favoriser son autonomie.

Utilisation ergonomique. Équipé de poignées ergonomiques et de deux roulettes avec frein pour faciliter les manœuvres, il assure une grande stabilité sur différentes surfaces et réduit les contraintes exercées sur les articulations du soignant.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.

 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr



Spécifications techniques

Charge max.	200 - 227 kg
Poids du produit	32 - 36 kg
Garantie	5 ans



Convient aux personnes à
mobilité légèrement réduite
à modérément réduite

5900 8200

Lotus verticalisateur actif

Confort d'assise ergonomique


Repose-jambe

Palette du repose-pieds

Pédale

Poignée de poussée

Poignée

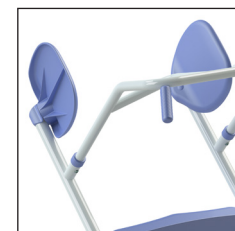


Composants du siège pivotants équipés d'un système de fermeture à encliquetage

Écartement mécanique de la base

Protection anti-choc

Roue pivotante Ø100

Article n°	Description de l'article	Matériau	Capacité de levage	Longueur x largeur x hauteur	Largeur des jambes	Extension mécanique de la base	Poids	Longueur du client
5900 8200	Lotus verticalisateur actif	acier	200 kg	96 cm x 66 cm x 110 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32 kg	170 cm – 195 cm
5900 8250	Lotus Compact verticalisateur actif	acier	200 kg	96 cm x 66 cm x 101 cm	66 cm	49 cm – 86 cm	32 kg	135 cm – 170 cm
5900 8270	Lotus XL verticalisateur actif	acier	227 kg	102 cm x 74 cm x 110 cm	74 cm	57 cm – 94 cm	36 kg	170 cm – 195 cm

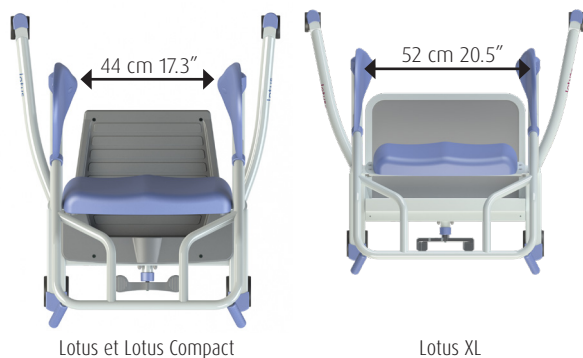

Lotus et Lotus Compact

Lotus XL

LFT8200-2026-01 FR



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
 Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
 Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl

Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Scan for
information

Copyright © 2026 Lopital. All rights reserved.