

Reflex XXL

Des soins sans limites, en toute autonomie

5100 5900

Reflex XXL chaise de douche-toilette

Le Reflex XXL reprend la philosophie éprouvée du design Reflex pour répondre aux besoins des utilisateurs de forte corpulence, avec une ergonomie réglable spécialement conçue pour les soins bariatriques. Le dossier réglable en hauteur et les accoudoirs réglables en largeur offrent un soutien personnalisé pour différentes morphologies. Les accoudoirs se verrouillent solidement et se déverrouillent facilement grâce à un bouton-poussoir, permettant des transferts fluides et maîtrisés. Avec son robuste châssis en acier inoxydable, sa stabilité renforcée et son puissant fonctionnement électrique, le Reflex XXL offre aux utilisateurs de forte corpulence un confort, une sécurité et une confiance sans compromis.

Conçu pour les environnements de soins exigeants, le Reflex XXL associe fiabilité, confort et fonctionnalités avancées dans une solution durable. Ses réglages synchronisés et fluides de la hauteur et de l'inclinaison assurent un positionnement précis, notamment grâce à une fonction d'inclinaison négative vers l'avant qui facilite naturellement la mise debout. Avec son espace généreux et sa capacité de charge élevée, le Reflex XXL favorise des soins sûrs, dignes et efficaces, pour les aidants comme pour les utilisateurs.

Soutien adaptable. Le dossier réglable en hauteur et les accoudoirs réglables en largeur offrent un soutien optimal pour une grande variété de morphologies. Les accoudoirs se verrouillent fermement en place et peuvent être déverrouillés d'une simple pression sur un bouton, garantissant des transferts fluides et contrôlés.

Fiable & Durable. Conçu pour les soins quotidiens et couvert par une garantie de 60 mois, il offre des performances fiables et durables.

Antibactérien & Résistant à la corrosion. Le revêtement antibactérien aux ions d'argent contribue à maintenir une hygiène optimale et à limiter les risques d'infection. Le châssis résistant à la corrosion, doté de surfaces lisses, garantit quant à lui une excellente durabilité et facilite le nettoyage.

Fonction d'assistance à l'inclinaison. Grâce à l'inclinaison négative de l'assise, le Reflex XXL offre une fonction efficace d'aide à la mise en position debout. Cela améliore l'autonomie de l'utilisateur tout en réduisant les contraintes physiques pour le soignant.




🌐 Découvrez nos produits en action grâce aux vidéos interactives disponibles sur notre site internet : www.lopital.fr

Spécifications techniques

Charge max.	275 kg
Poids du produit	70 kg
Largeur du siège (réglable)	70 – 80 cm
Profondeur du siège	53 cm
Hauter du siège (réglable)	45 – 76 cm



Appui-tête réglable.

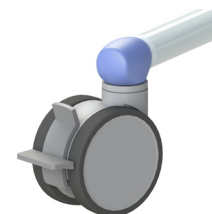

3 roues pivotantes et 1 roue directionnelle, avec freins individuels.



Convient aux personnes à mobilité modérément réduite à fortement réduite

5100 5900

Reflex XXL chaise de douche-toilette

En option

6950 1104 Bassin avec couvercle en plastique.



Spécifications techniques

Longueur totale du châssis de base	121 cm
Largeur totale du châssis de base	84 cm
Rayon de braquage	140 cm
Réglage de l'inclinaison	0 à 30 degrés vers l'arrière, 10 degrés vers l'avant
Alimentation électrique	24V
Capacité de la batterie	7Ah
Chargeur (Mascot 3743)	110-240V AC, 50-60Hz, max. 0.35A, longueur du câble 1.5 m
Profondeur/hauteur de l'appui-tête complet	profondeur 7 cm ; hauteur 12 cm
Réglage en hauteur du repose-pieds	8 cm

LFT5900-2026-01 FR



Pour plus d'information, visitez également notre site web : www.lopital.fr
Lopital Nederland B.V., Laarakkerweg 9, 5061 JR Oisterwijk
Tel +31 (0)13 52.39.300, E-mail info@lopital.nl, www.lopital.nl



ISO CERTIFIED
9001 - 13485 - 14001

MADE IN
THE NETHERLANDS



Toutes les aides fabriquées par Lopital sont conformes aux normes applicables aux produits médicaux de Classe I (MDR (UE) 2017/745).

Copyright ©2026 Lopital. All rights reserved.